

商品取扱説明書

000-0706 温灸 BOX

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本説明書をお読みになり、正しくご使用ください。



同梱物／材質


- ①本体／竹
- ②ストラップ／ナイロン
- ③ハンドル／木

※ストラップは本体を体に固定する際にご使用ください。
ストラップを伸ばしすぎると、ご使用中に切れてしまう恐れがあります。

■組立て方・使用方法



ハンドルを本体のネジ穴に差し込み、右回転させて固定してください。

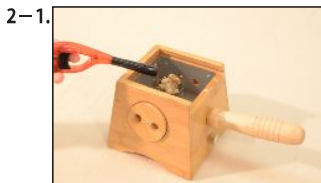

(もぐさを使用する場合)
適切な量のもぐさを入れ、着火器等で火を付けます。



(切り艾を使用する場合)
火を付けた切り艾を本体に入れます。



身体の上にタオルを敷き、その上に本体を設置します。また、必要に応じてストラップを取り付けてください。

※長時間使用したり、身体をむやみに動かすと、やけどや低温やけど等の恐れが大変危険です。



使用中、蓋や通気孔を開閉することで、もぐさや切り艾の燃焼具合と温度を調整することができます。

■使用後



完全に燃え尽きていることを確認の上、身体から取り外します。



使用後は、本体内部の灰を捨ててください。

■使用上のご注意



- 火を使う特性上、やけど、低温やけどの危険があります。商品取扱い以外のやけどによる責任は負いかねます。
- 長時間同じ場所に使用せず、艾の燃焼状態をこまめに確認してください。
- 使用中、細かな灰等が落ちる可能性があります。肌に直接使用せず、タオル・手ぬぐいなどの上からご使用ください。
- 火災の危険があります。使用後は、消火を十分に確認してください。
- 内部の鉄片が錆びる恐れがあるため、水洗いはお控えください。



- 使用中は十分に換気をしてください。
- 以下に該当する場合は使用をお控え下さい。肌に異常がある時、体調不良時、肌に水気(汗など)がある時、酒酔い時。
- 以下に該当する方は、医師等とご相談の上、十分注意してご使用ください。妊娠中あるいは妊娠の可能性のある方、体力の低下している方、ご自分で温度調節のできない方、幼児、動物。

輸入販売元 トワテック株式会社
〒113-0033 東京都文京区本郷 2-3-7 お茶の水本町ビル 2階
TEL : 0120-609-151 / FAX : 0120-609-655